

GECKO

Cățărător de scări cu roți anti-răsturnare


Antano, liderul mondial în domeniul urcă-scărilor, a creat Gecko, cu un brevet exclusiv, singurul urcă-scări automat anti-răsturnare.

Gecko permite persoanelor cu dificultăți de mobilitate să urce și să coboare orice tip de scară în deplină siguranță.

Sistemul automatizat permite fiecărui operator să conducă fără efort.

Tehnologia anti-răsturnare patentată garantează zero erori, accidente sau incidente în timpul urcării sau coborârii.

Gecko este universal și poate fi folosit imediat.

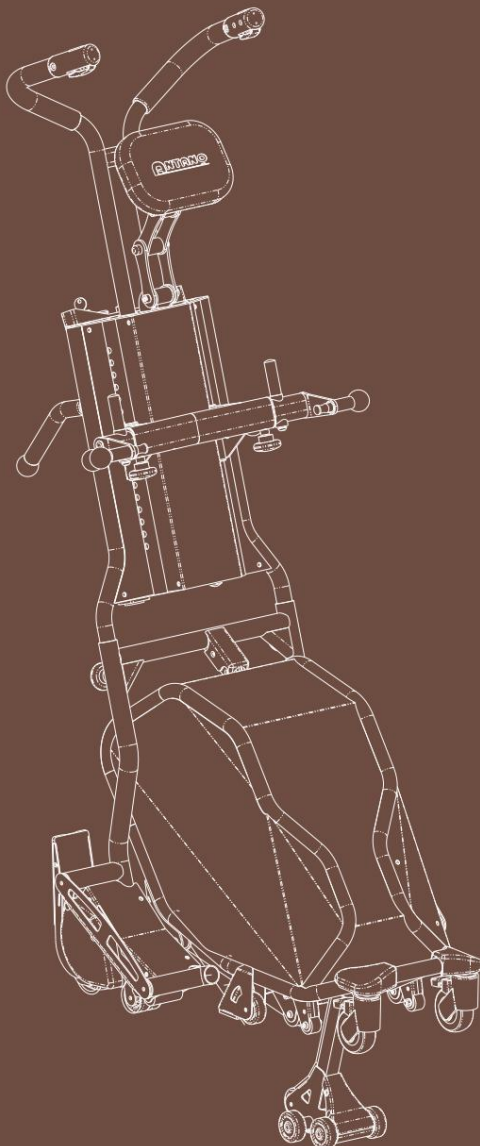







■ BARĂ DE PROCIARE REGLABILĂ

Bara de tractare este reglabilă pe înălțime pentru a se potrivi operatorului în timpul manevrelor de urcare și coborâre.



■ REGLABIL PE ÎNĂLȚIME ȘI ADÂNCIME TETIERA

Tetiera se ajustează în diferite poziții pentru a oferi utilizatorului un confort sporit în timpul utilizării ajutorului.

■ PANOUL DE CONTROL

Cheie de contact

Buton de urgență

Regulator de viteză

Indicador baterie

Contor de timp de utilizare

Selector cu cheie pentru utilizare: automată, semiautomată și manuală

Comutator selector de înclinare pentru cuplarea scaunului cu roțile





■ MÂNERE DE SPRIJIN SPATE

Suportul din spate facilitează manevrarea urcătorului de scări pe podea. Butonul roșu activează sistemul anti-răsturnare frontal și permite urcătorului de scări să se încline automat la coborârea primei trepte.



■ ANCORĂ CULISANTĂ PENTRU SCAUN CU ROTI SPRIJIN

Reglarea fixării spătarului scaunului cu roțile pentru așezarea corectă a acestuia pe urcătorul de scări.




■ SUPORT PENTRU BLOCARE ȘI RUPARE

Scaunul cu roțile este andocat și fixat ferm datorită blocurilor de fixare.



■ DISPOZITIV ANTI-RĂSTURNARE FRONTAL (BREVETAT)

Tehnologia brevetată permite stabilitatea mașinii pe scări, sprijinindu-se întotdeauna pe două trepte. Aparatul de urcat scări este singurul care nu are probleme de dezechilibru în faza intermediară de urcare și coborâre între trepte. În plus, dispozitivul permite depășirea unor trepte de 10 până la 24 cm fără nicio ajustare.

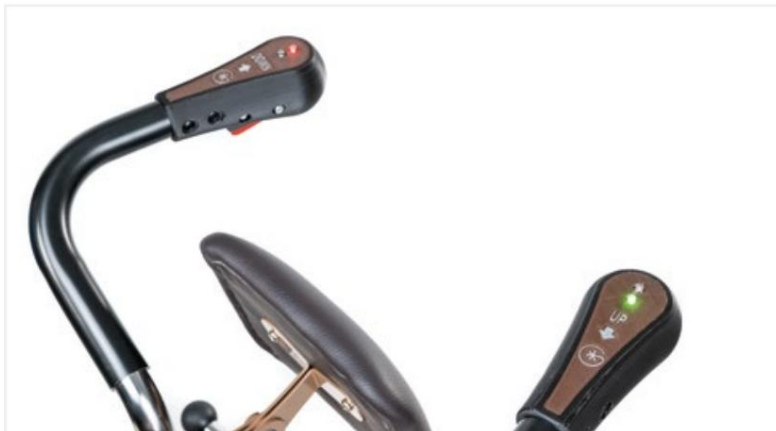

■ POZIȚIE CORECTĂ LED INDICATOR

LED-urile din partea superioară a barei de tractare indică poziția corectă a mașinii pe marginea treptei la coborâre (mânerul stâng) și pe contrapesa din spate la urcare (mânerul drept). Sistemul foarte intuitiv este echipat cu LED-uri cu lumini roșii sau verzi.



■ GRUP DE RECUNOAȘTERE A MARGINII PASULUI

Sistemul recunoaște marginea primei trepte în timpul coborârii.



■ ROȚI PIVOTANTE FRONTALE CU FRÂNĂ CU ACȚIUNE DUBLĂ

Roțile pivotante permit o manevrabilitate mai mare pe podea. Când se acționează frâna cu acțiune dublă, toate componentele roților se blochează.



■ SENZORI DE POZIȚIE

Senzorii de poziție față și spate permit mașinii să recunoască automat poziția corectă a utilizatorului pe trepte și să ofere o indicație LED-urilor de control de pe bara de tractare.






■ SUPORT PENTRU ROȚI PENTRU SCAUNUL CU ROTILE

Suportul carcasei este reglabil în lățime pentru a se potrivi diferitelor tipuri de roți pentru scaune cu rotile. Reglabil de la 40 la 71 cm. Opțional: posibilitate de extensie XL.

OPȚIONALE

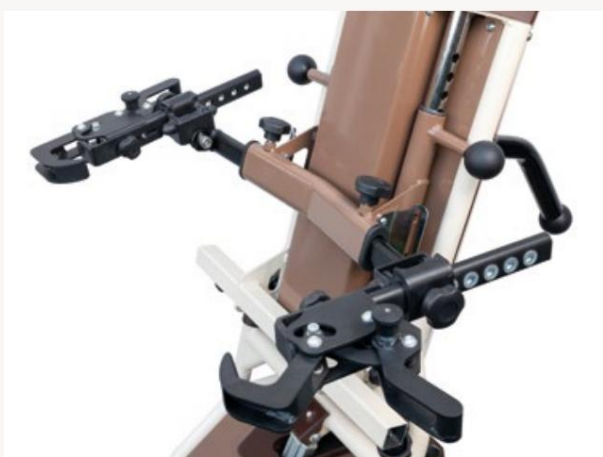

■ ANCORĂ 3D PENTRU SCAUN CU ROTILE

Sistem de fixare patentat pentru scaune cu rotile cu spătare non-standard (de exemplu, cărucior).



■ Scaun cu rotile reglabil în adâncime CUPLARE

Setare minimă 16 cm, maximă 24 cm.



■ CENTURĂ CU 5 PUNCTE (NUMAI PE SCAUNUL GECKO)

Datorită centurii cu 5 puncte, utilizatorul poate fi ancorat la dispozitivul de urcare a scării pentru o siguranță sporită pe scări.



■ GHID FRONTAL

Datorită poziției frontale a operatorului, trecerea este facilitată chiar și pe palierele cu adâncime redusă. În plus, poziția frontală a operatorului oferă utilizatorului o mai mare liniște sufletească.

Sistem de cuplare pentru scaune cu roțile multiple , soluția ideală pentru mobilitatea dumneavoastră

Sistemul multifuncțional de cuplare pentru scaune cu roțile este ușor și sigur de utilizat. De asemenea, este potrivit pentru orice tip de scaun cu roțile, inclusiv cele standard, super-ușoare, pliabile sau cu cadru rigid. Datorită diverselor opțiuni de cuplare și accesorii, vă puteți personaliza experiența de mobilitate cu Gecko și vă puteți bucura de libertate maximă de mișcare.



VERSATILITATE

Urcătorul electric de scări Gecko este un produs versatil care poate fi utilizat pentru transportul diferitelor tipuri de scaune cu roțile și ajutoare.

SIGURAN ȚĂ

Urcătorul de scări cu roți Gecko este echipat cu roți anti-răsturnare și un sistem de cuplare pentru mai multe scaune cu roțile, care garantează transportul sigur și rapid.

ADAPTABILITATE

Urcătorul electric pentru scări Gecko poate fi ajustat și personalizat cu diferite accesorii pentru a se potrivi nevoilor diferite ale utilizatorilor.

PERSONALIZARE

Urcătorul electric de scări Gecko oferă mai multe opțiuni de atașare și accesorii pentru a personaliza experiența de mobilitate a utilizatorilor.



Rampe Gecko : flexibilitate de mișcare la îndemână

Rampele reglabile pe lățime vă permit să ancorați diverse tipuri de cărucioare și scaune cu rotile, inclusiv electrice, superușoare și cu cadru rigid.

Reglarea lățimii rampei este extrem de ușoară și ușor de utilizat. În plus, rampele Gecko sunt construite dintr-un material ușor, dar rezistent, pentru a asigura siguranță maximă în timpul transportului scaunelor cu rotile și al altor ajutoare.



ACCESIBILITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Rampele reglabile permit persoanelor cu dizabilități să acceseze clădirile și zonele publice în siguranță, depășind barierele arhitecturale.

ADAPTABILITATE

Rampele Gecko pot fi ajustate în lățime, ceea ce le face potrivite pentru diverse tipuri de cărucioare și scaune cu rotile, inclusiv cele electrice, super-ușoare și cu cadru rigid.

SIGURAN ȚĂ

Rampele Gecko asigură siguranță maximă în timpul transportului scaunelor cu rotile și al altor ajutoare, deoarece sunt construite dintr-un material ușor, dar rezistent.

VERSATILITATE

Rampele Gecko pot fi utilizate atât în interior, cât și în exterior, asigurând flexibilitate și adaptabilitate maximă.



■ Scaun GECKO

Urcător de scări cu roți anti-răsturnare și scaun

Versiunea Gecko SEAT este ideală pentru cei cu o gamă mai largă de mișcare. Are un scaun confortabil și cotiere rabatabile pentru un transfer ușor.

De asemenea, are un suport pentru picioare.



Versiunea SEAT are o bară de remorcare reglabilă pentru a se adapta mai bine operatorului în timpul manevrelor și o tetieră reglabilă pentru un confort sporit al utilizatorului. Această versiune are, de asemenea, cotiere rabatabile și un suport pentru picioare rabatabil.



■ COTERE PLIABILE

Pentru un transfer ușor al utilizatorului în fiecare etapă de utilizare.




■ PLATĂ PLIABILĂ

Placa pentru picioare poate fi pliată în jos pentru a facilita transferurile utilizatorului.

GECKO

GECKO vers. SEAT

	Total	62,4	62,2
Greutate (kg)	Bară de tracțiune	19,8	19,5
	Corpul mașinii	42,6	42,7
	Adăugați rampe	5,8	-
	Adăugați ghidaj frontal	3,5	-
	Capacitate de încărcare (kg)	160 (Opțional 180)	160 (Opțional 180)
Dimensiuni totale (mm)	Minim	(LxAxÎ) 600x785x1290	(LxAxÎ) 535x1015x1290
	Maxim	(LxAxÎ) 720x1090x1530	(LxAxÎ) 535x1070x1450
Lățimea minimă a scării (mm)		620	550
Adâncimea minimă a treptei - banda de rulare (P) (mm)		200	200
Înălțimea treptei (H1) (mm)	Minim	100	100
	Maxim	240	240
Spațiu minim de manevră (aterizare în formă de L) (mm)		980x980	850x850
Spațiu minim de manevră (aterizare în formă de U) (mm)		980x1960	850x1700
Spațiu minim de manevră (palier în formă de L) (mm) cu rampe suplimentare		1150x980	-
Spațiu minim de manevră (palier în formă de U) (mm) cu rampe suplimentare		2300x1150	-
Viteză maximă (baterie nouă cu încărcare de 100% până la 90%) (pași/minut)		18 ani	18 ani
Diametrul roții spate (mm)		125	200
Baterie de alimentare		2 x (12 Vcc - 9 Ah)	2 x (12 Vcc - 9 Ah)
Încărcător de baterii	Vin	230 V c.a. - 50/60 Hz	230 V c.a. - 50/60 Hz
	Vout	24 Vcc	24 Vcc
Autonomie (baterie nouă cu încărcare inițială între 100% și 90%) (nr. de trepte cu 80 kg transportate)	Urcare + Coborâre	1200	1200
	Ascensiune	600	600
	Coborâre	600	600
Autonomie (baterie nouă cu încărcare inițială între 100% și 90%) (nr. de trepte cu 160 kg transportate)	Urcare + Coborâre	380	380
	Ascensiune	190	190
	Coborâre	190	190
Autonomie cu indicator de încărcare de 25% (număr de pași cu 80 kg transportați)		50	50
Timp mediu de încărcare a bateriei (ore)		8	8
Putere motor (W)		350	350
Temperatura de utilizare (C°)		0 - 40	0 - 40
Temperatura de depozitare (într-un mediu uscat) (C°)		-10 - 40	-10 - 40
Dimensiuni ambalaj L x A x Î (mm)		800x650x900	800x650x900
Greutate cu ambalaj (kg)		70	70
Nivel sonor (dB (A))		< 70	< 70

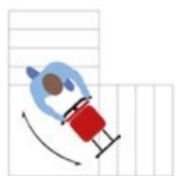

Scară dreaptă



Scară trapezoidală



Scară în spirală



GECKO

SISTEM ANTI-RĂSTURNARE PATENTAT

RECUNOAȘTEREA ÎNCEPUTULUI ȘI A SFÂRȘITULUI PASULUI

POTRIVIT PENTRU TOATE TIPURILE DE SCĂRI

POZIȚIE CONFORTABILĂ ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

FUNCȚII PERSONALIZABILE

POATE FI UTILIZAT IMEDIAT

