


# LG 2020

## Urcător de scări cu roți și scaun

LG 2020 este soluția care satisface toate nevoile de mobilitate la domiciliu. Datorită greutateii sale extrem de ușoare și dimensiunilor compacte, permite o manevrabilitate ușoară chiar și în spații mici. Este puternic și durabil, cu o autonomie de neegalat. Noul și unic mecanism de urcare... face din LG2020 cel mai rapid și mai confortabil urcător de scări cu roți de pe piață astăzi.



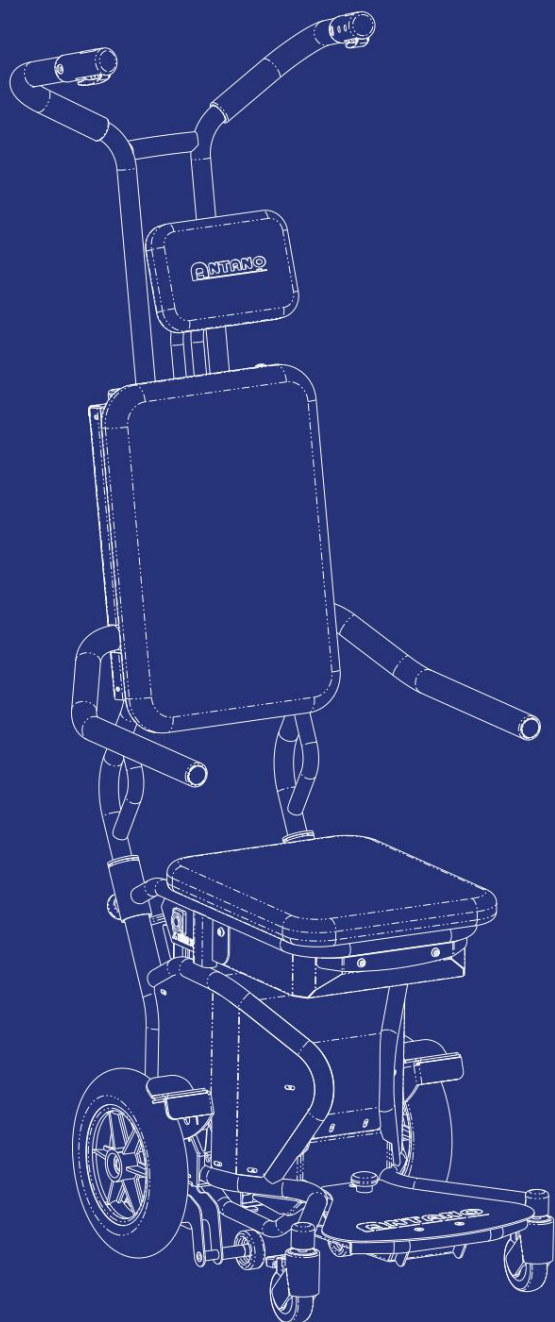



RAPID  
UŞOR  
PUTERNIC  
CONFORTABIL



■ TETIERĂ REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME

Reglare de până la 16 cm pentru un confort sporit al utilizatorului



■ MÂNER ERGONOMIC

Cu butoane mari pentru control ușor și sigur al urcătorului de scări. Reglare până la 33 cm.



■ COTERE PLIABILE

Acestea fac transferurile simple și sigure, optimizând accesibilitatea pentru utilizator



■ PLATĂ EXTENSIBILĂ

Asigură o potrivire personalizată, cu o ajustare de până la 9 cm



#### ■ PANOU DE CONTROL

- Potențiomtru pentru reglarea vitezei
- Selector de moduri de urcare și coborâre pas cu pas sau secvențial
- Indicator al nivelului de încărcare al bateriei
- Cheie de contact
- Buton de urgență
- Buton de reglare a înălțimii tetierei superioare
- Buton de reglare a înălțimii barei de remorcare inferioare
- Indicator de pantă



#### ■ FRÂNĂ REGLABILĂ

Garantează siguranța și adaptabilitatea pe diferite tipuri de scări, crescând stabilitatea utilizatorului.



#### ■ ROȚI FAȚĂ PIVOTANTE

Cu frâna cu acțiune dublă, acestea oferă manevrabilitate și control superior, pentru o călătorie lină și sigură.

# LG 2020/30

Urcător de scări cu roți - versiune cu treaptă de 24 până la 30 cm

Noul urcător de scări LG2020/30 satisface nevoile celor care caută un mijloc sigur, puternic și ușor de a urca scări înalte de 30 cm.





■ DISPOZITIV DE REGLARE A ÎNCLINĂRII

Noul suport spate este reglabil pentru a se adapta mai bine la diferite înălțimi ale treptelor, crescând siguranța și stabilitatea fără a fi nevoie să căutați punctul de echilibru.



■ Lumină de curtoazie cu LED-uri

Lumina de curtoazie LED facilitează vizibilitatea treptelor

■ COMPACT ȘI UȘOR DE DEZASAMBLAT



	LG 2020	LG 2020/30
Greutate totală auxiliară [kg]	51.2	52
Greutatea corpului mașinii „A” [kg]	28,4	29.2
Greutatea scaunului „B” [kg]	11.2	11.2
Greutatea spătarului „C” [kg]	11.6	11.6
Capacitate maximă de încărcare [kg]	160	160
Putere motor [W]	350	350
Amprentă minimă [mm x mm]	(535 x 740 x 1260)	(535 x 740 x 1260)
Amprentă maximă [mm x mm]	(535 x 840 x 1570)	(535 x 840 x 1570)
Lățimea minimă a scării [cm]	58	58
Spațiu minim de manevră (aterizare în formă de L) [cm x cm]	(70 x 70)	(70 x 70)
P - Adâncimea minimă a treptei [cm]	18 ani	18 ani
H1 - Înălțimea treptei [cm]	până la 23	de la 23 la 30
Viteză maximă (cu bateria încărcată) [pași/min]	36	36
Baterii de alimentare (2 baterii per aparat)	12 Vcc – 9 Ah	12 Vcc – 9 Ah
Tensiunea încărcătorului de baterie	230 V c.a. / 50 ÷ 60 Hz	230 V c.a. / 50 ÷ 60 Hz
Autonomie baterie (referință pers. 80 / 160 kg) [număr de etaje]	128 / 128	128 / 128
Urcând [număr de etaje]	64 / 14	64 / 14
Coborând [număr de etaje]	64 / 14	64 / 14
Autonomie cu indicator de rezervă de încărcare [număr de etaje]	3	3
Timp mediu de încărcare a bateriei [ore]	8	8
Temperatura de depozitare cu ambalajul [°C] (în condiții ambientale uscate)	-10 - 40	-10 - 40
Interval de temperatură a mediului de funcționare [°C]	0 - 40	0 - 40
Dimensiunile ambalajului [mm x mm]	970 x 570 x 650	970 x 570 x 650
Greutate totală cu ambalaj [kg]	57,2	58
Nivel de presiune sonoră ponderat A [dB]	< 70	< 70



Scară dreaptă



Scară trapezoidală



Scară în spirală